

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

Modelo: HP-15AKJ-NV

Tamaño: 30 cm x 60 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. NO DESTRUIR. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, CHOQUE ELÉCTRICO E INCENDIO, ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES :

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO SE USE MIENTRAS DUERME.
3. NO SE USE EN UN BEBÉ O ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBERÁ SER USADA EN O POR UNA PERSONA DISCAPACITADA, QUE ESTÉ DURMIENDO, QUE NO PUEDA HACER LAS COSAS SIN AYUDA, O QUE ESTÉ INCONSCIENTE, UNA PERSONA CON DIABETES, UNA PERSONA CON INSENSIBILIDAD AL CALOR O UNA PERSONA CON MALA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA A MENOS QUE SE LE ATIENDA CON CUIDADO.
5. ESTE APARATO NO DEBERÁ SER USADO POR NIÑOS. ES NECESARIO MANTENER UNA VIGILANCIA DE CERCA CUANDO CUALQUIER APARATO SEA USADO CERCA DE NIÑOS. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO DEBE USARSE EN ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS SIN IMPORTAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTROL; REVISE LA PIEL DEBAJO DE LA ALMOHADILLA CON FRECUENCIA.
8. SI EL APARATO TIENE UNA CUBIERTA REMOVIBLE, NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN LA CUBIERTA EN SU SITIO.
9. NO DEBE USARSE EN UNA ATMÓSFERA DE OXÍGENO.
10. NO USE PASADORES U OTROS OBJETOS METÁLICOS PARA SUJETAR ESTA ALMOHADILLA EN SU LUGAR.
11. NO SE SIENTE SOBRE LA ALMOHADILLA, CONTRA LA MISMA, NI LA TRITURE; EVITE DOBLECES PRONUNCIADOS.
12. DESCONECTE CUANDO NO SE USE. NUNCA DEJE EL APARATO SIN ATENCIÓN, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES.
13. NUNCA JALE LA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
14. NO USE EL CABLE COMO ASA Y NO PELLIZQUE EL CABLE.
15. NO META, ATORE, DOBLE, CRUCE, PELLIZQUE NI ENVUELVA EL CONTROL O EL CABLE CON LA ALMOHADILLA DE CALOR DURANTE SU USO.
16. EXAMINE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESHÁGASE DE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SEÑALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA EN NINGUNA FORMA. NO HAY PARTES QUE PUEDAN RECIBIR MANTENIMIENTO DEL USUARIO. SI LA ALMOHADILLA NO FUNCIONA SATISFACTORIAMENTE, CONSULTE LA GARANTÍA PARA CONOCER LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE RELACIONES CON EL CONSUMIDOR (GARANTÍA NO VÁLIDA EN MÉXICO).
17. SI EL APARATO TIENE UNA CUBIERTA REMOVIBLE: EXAMINE CUIDADOSAMENTE LA CUBIERTA INTERIOR ANTES DE CADA USO. DESHÁGASE DE LA ALMOHADILLA SI LA CUBIERTA INTERIOR MUESTRA ALGUNA SEÑAL DE DETERIORO.
18. ENREDE LIGERAMENTE EL CABLE EN SÍ MISMO CUANDO LO GUARDE. ENREDARLO APRETADAMENTE PODRÍA DAÑAR EL CABLE Y LAS PARTES INTERNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDAR Y NO PERMITA QUE SE CREEN ARRUGAS AL COLOCAR OBJETOS SOBRE LA ALMOHADILLA. GUARDE EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
19. SI INCLUYE UN CONTROL DESPRENDIBLE, USE SOLAMENTE CON EL CONTROL PROVISTO.
20. USE ESTA ALMOHADILLA SOLO CON EL VOLTAJE NOMINAL, COMO SE MARCA EN EL PRODUCTO. NO SE USE CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE CORRIENTE, O INVERSORES.
21. NO USE ESTA ALMOHADILLA CON PREPARACIONES DE LINIMENTO, BÁLSAMOS O UNGÜENTOS. PUEDE RESULTAR EN QUEMADURAS EN LA PIEL.
22. SI LA ALMOHADILLA VIENE CON CIERRES MAGNÉTICOS, NO LA USE SI TIENE UN MARCAPASOS, UN DESFIBRILADOR CARDIOVASCULAR IMPLANTABLE (ICD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), UNA BOMBA INTERNA DE INSULINA U OTRO DISPOSITIVO MÉDICO QUE SEA SENSIBLE A LOS IMANES.
23. ESTE APARATO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN HOSPITALES.
24. LOS MODELOS CON FUNCIÓN DE MASAJE NO DEBEN USARSE EN EL ABDOMEN CUANDO SE PRESENTE DOLOR, O EN ÁREAS QUE ESTÉN HINCHADAS, INFLAMADAS, CUBIERTAS DE ERUPCIONES EN LA PIEL O CON DOLOR SIN EXPLICACIÓN. CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DE USAR CUALQUIER EQUIPO DE ESTE TIPO.
25. ALGUNOS MODELOS PUEDEN CONTENER MATERIALES DE RELLENO. SI EL MATERIAL DE RELLENO SE SALE DEBIDO A ALGÚN DAÑO EN EL PRODUCTO, DEJE DE USAR EL PRODUCTO. NO INGIERA EL MATERIAL DE RELLENO. SI SE INGIERE EL MATERIAL, BUSQUE AYUDA MÉDICA.
26. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



Esta almohadilla de calor tiene una clavija polarizada (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así NO encaja, comuníquese con un electricista calificado. NO intente anular esta característica de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA EL USO.



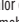

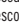
Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Conecte la unidad en un tomacorriente de 120 Volts c.a. (Fig. 1). 2. Coloque la almohadilla de calor en el área deseada del cuerpo (Fig. 2). 3. Presione el botón  de encendido para encender la almohadilla de calor y activar el ajuste de calor tibio. 4. Presione el botón  de encendido para pasar entre las configuraciones de calor tibio, bajo, medio y alto hasta que alcance la configuración deseada (Fig. 3). 5. Presione el botón  de encendido hasta que la unidad se haya apagado y desconecte la unidad del tomacorriente para guardarla.

Luces de control de temperatura

Botón de encendido

Luz de apagado automático



CARACTERÍSTICA DE APAGADO AUTOMÁTICO:

• Su control del soporte para la espalda está equipado con una característica de seguridad de apagado automático. Esta característica ayuda a conservar la energía al apagarse automáticamente después de 2 horas de uso continuo. • La luz indicadora de apagado automático parpadeará para indicar que la unidad se ha apagado.

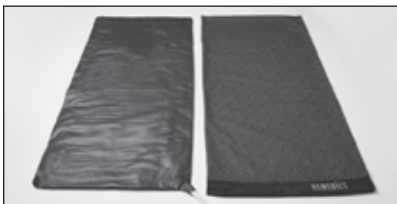
CÓMO USAR LA TERAPIA HÚMEDA CON SU ALMOHADILLA DE CALOR

La opción de calor húmedo proporciona un calor más penetrante para alivio del dolor. Siga las instrucciones siguientes para la terapia de calor húmedo. 1. Desabroche la cubierta de tela de la almohadilla de calor y retire la esponja. 2. Moje la esponja con agua e insértela en la cubierta junto a la almohadilla de calor. Puede usar un atomizador para controlar la saturación. NO empaque la esponja. 3. NO moje el cable de electricidad ni la almohadilla de calor.

PELIGRO: NO SUMERJA EN AGUA LA ALMOHADILLA NI EL CABLE NI LOS COLOQUE DEBAJO DE AGUA CORRIENTE. Asegúrese de los componentes eléctricos estén completamente secos antes de realizar una conexión eléctrica.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. **NO TIRE DEL CORDÓN.** 2. Desabroche y retire la funda de tela. 3. Lavar la funda solamente a máquina con agua fría en ciclo suave o lavar a mano. 4. Secar en secadora a temperatura baja o secar extendido horizontalmente a la sombra. 5. Solo la funda extraíble se puede lavar a máquina. **NO** coloque la almohadilla térmica en la lavadora.



ALMACENAMIENTO

Coloque la almohadilla de calor en su caja o en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con bordes agudos u objetos puntiagudos, que pudieren cortar o perforar la superficie de la tela. Para evitar que se rompa, **NO** envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. **NO** cuelgue la unidad por el cable de corriente.

ALMOHADILLA CON CALOR

Marca: HoMedics • Modelos: HP-15AKJ-NV

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 70 W



Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarras o flamas.

No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

PELIGRO: El uso inapropiado puede resultar en quemaduras. Para prevenir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica e incendio, este producto debe usarse de acuerdo a las instrucciones. No lo use en ambientes ricos en oxígeno ni cerca de equipos que emitan oxígeno. No coloque la almohadilla en un microondas. Desconecte cuando no esté en uso. Nunca desconecte el producto jalándolo del cordón y no use el cordón para cargarlo o moverlo. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026