

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. CUANDO SE USAN PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN TENER EN CUENTA CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- SIEMPRE desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla. • NO intente recoger una unidad que haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente. • NUNCA use afileros ni otros sujetadores metálicos con este artefacto. • NO ponga ni guarde productos donde puedan caer sobre empujados a una bañera o a un lavabo. • NO lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

- Un aparato NUNCA debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconectar del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas o accesorios. • Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es utilizado por niños, personas minusválidas o personas con discapacidades, o con ellos o cerca de ellos. • Utilice este artefacto solamente para el objetivo para el que fue diseñado y como se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios que no se proporcionan con la unidad.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o el enchufe dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó, o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics® para que lo examinen y lo reparen. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo haga funcionar donde se utilicen productos de rociado por aerosol ni donde se esté administrando oxígeno. • NO lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas. • NO está diseñado para ser usado por niños. • NO use este masajeador cerca de prendas de vestir sueltas, alhajas o cabello largo. • NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso. • Para desconectar, coloque todos los controles en la posición “off” (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente. • NO lo use en exteriores. • NUNCA haga funcionar el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares. • Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. NO lo use sobre zonas de la piel sin sensibilidad o con mala circulación. El uso del calor por parte de niños o personas con discapacidades sin supervisión puede resultar peligroso. • NO lutilice el masajeador cerca de prendas sueltas o joyas. • Mantenga el cabello largo alejado del masajeador durante su uso. **PRECAUCIÓN: Todo el servicio de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio de HoMedics® autorizado (Servicio no válido en México).**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ARTEFACTO.

- Consulte con su médico antes de usar este producto si: • Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación sobre su salud
- NO se recomienda su uso por parte de diabéticos. • NUNCA deje el artefacto sin supervisión, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA cubra el artefacto mientras esté en funcionamiento. • NO use este producto durante más de 15 minutos por vez. • El uso prolongado puede causar un recalentamiento del producto y disminuir su vida útil. Si esto sucediera, interrumpa su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en funcionamiento. • NUNCA use este producto directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas. • NO use este producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a dormir. El masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño. • NUNCA use este producto mientras está en la cama. • Este producto NUNCA debe ser usado por un individuo que padezca algún trastorno físico que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad inferior de su cuerpo. • NUNCA use este producto en un automóvil. • Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente.
- Este artefacto está diseñado para uso personal, no profesional.

INSTRUCCIONES DE USO

Precaución: Para evitar pellizcos, no se recueste sobre el mecanismo de masaje de espalda del cojín cuando esté ajustando la posición de su cuerpo. No trabe ni fuerce ninguna parte de su cuerpo en el mecanismo móvil de masaje. La unidad trae un tornillo en el respaldo de la unidad que sirve para proteger el mecanismo de masaje durante el transporte; es necesario quitar ese tornillo antes del primer uso para permitir que la función de masaje pueda actuar. Use la llave Allen incluida. Luego, deseche el tornillo apropiadamente. **ADVERTENCIA:** Si no retira el tornillo, se puede causar un daño permanente al cojín para masajes. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta unidad está equipada con un enchufe polarizado (una varilla metálica es más ancha que la otra). Este enchufe encaja de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. NO modifique el enchufe de ninguna forma. **NOTA:** En esta unidad, hay una función de apagado automático que se activa, por su seguridad, al cabo de 15 minutos. 1. Desate la correa del cable, extienda el cable e inserte el enchufe en un tomacorriente doméstico de 120 Volts c.a. para alimentar la unidad. 2. Coloque el cojín sobre la mayoría de los tipos de silla para obtener un espléndido masaje mientras lee, descansa o incluso mientras trabaja. Consulte la página 3 para conocer las instrucciones sobre el uso del control manual.

SISTEMA DE CORREAS

El cojín para masaje incorpora un exclusivo sistema de correas que le permite ajustarlo a casi todos los tipos de sillas. Simplemente deslice las correas sobre el asiento o la silla y ajuste las correas para que quede en una posición fija. Su cojín para masaje no se deslizará ni se resbalará.


MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente con una esponja suave, apenas humedecida. NUNCA permita que el agua ni otro líquido entren en contacto con la unidad. • NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla. • NO use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, o químicos agresivos, que puedan o no ser inflamables y/o causar daño al producto que desea limpiar. • NO intente reparar el masajeador. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

PARA GUARDAR. Coloque el cojín para masaje en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes filosos u objetos punzantes que puedan cortar o perforar la superficie de tela. Para evitar roturas, no enrolle el cable alrededor de la unidad. **NOTA:** NO se recomienda para el uso en superficies de madera puesto que la cremallera puede dañar la madera. También se recomienda poner cuidado cuando se usa con muebles tapizados. **NOTA:** Solo se debe ejercer una fuerza suave contra la unidad para eliminar cualquiera y todos los riesgos de lesión. Puede suavizar la fuerza del masaje colocando una toalla entre usted y la unidad.

MECANISMO MÓVIL DE MASAJE

Con iluminación LED (se enciende una luz roja cuando se activa el calor).

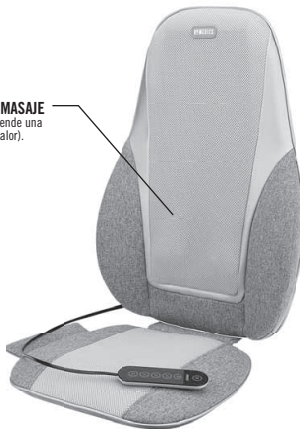

NOTA: El mecanismo móvil de masaje siempre queda fijo o finaliza en la posición más baja. Se moverá a esta posición después de que se haya apagado la unidad. Si se interrumpe el suministro eléctrico, al restablecerse la energía, el mecanismo quedará fijo o se moverá hacia su posición más baja.

PRECAUCIÓN: Todo el servicio de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio de HoMedics® autorizado (Servicio no válido en México).

ZONAS DE MASAJE

Los botones de zona hacen que el mecanismo de masaje en movimiento se dirija a áreas específicas de la espalda. Para seleccionar un área de masaje, presione el botón y la luz LED correspondiente se iluminará. Para anular la selección, presione el botón nuevamente y la luz LED correspondiente se apagará.

ESPALDA COMPLETA

El mecanismo de masaje se desplaza hacia arriba y hacia abajo por la espalda.

SUPERIOR DE LA ESPALDA

El mecanismo de masaje se enfoca desde la espalda media hasta la parte superior.

CALOR

Para un calor relajante cuando el masaje está activado, presione el botón de calor y la luz LED correspondiente se iluminará. Para anular la selección, presione el botón nuevamente y la luz LED correspondiente se apagará. Por su seguridad, la calefacción no se puede encender si no se selecciona masaje.



ENERGÍA

Para activar las funciones de masaje, primero presione el botón de encendido. El indicador LED se iluminará cuando la almohadilla de masaje esté encendida. Para apagar las funciones de masaje, presione el botón nuevamente. El indicador LED parpadeará mientras el mecanismo de masaje vuelve a su punto más bajo y luego se apagará.

VIBRACIÓN

Para activar la vibración, presione el botón de vibración una vez para baja intensidad, nuevamente para intensidad media y una tercera vez para alta intensidad. Se iluminará la luz LED correspondiente. Para apagar la vibración, presione vibración por cuarta vez.

ESPALDA BAJA

El mecanismo se enfoca desde la parte media a la espalda baja.

COJÍN PARA MASAJE

Marca: HoMedics • Modelos: MCS-382H, MCS-382H-CA, MCS-382HJ

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 30 W

Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas.

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026

NOM