

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAYA NIÑOS PRESENTES, SIEMPRE SE DEBEN RESPETAR DETERMINADAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYEN LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. • **NUNCA** intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente. • **NO** lo use mientras toma un baño o se ducha. • **NO** coloque ni guarde el artefacto en un lugar donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta. • **NO** lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido. • **Nunca** use afilares ni otros sujetadores metálicos con este artefacto.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

- **NUNCA** se debe dejar un artefacto enchufado sin supervisión. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas o accesorios. • Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o personas inválidas o con incapacidades, con ellos o cerca de ellos. • Utilice este artefacto solamente para el objetivo para el que fue diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios que no se proporcionan con la unidad. • **NUNCA** haga funcionar este artefacto si tiene el cable o el enchufe dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó, o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics® para que lo examinen y lo reparen. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • **NUNCA** deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • **NO** lo haga funcionar donde se utilicen productos de rociado por aerosol ni donde se esté administrando oxígeno. • **NO** lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede producirse calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas. • **NO** lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija. • Para desconectar, coloque todos los controles en la posición apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente. • **NO** lo use en exteriores. • **NUNCA** haga funcionar el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares. • Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. No lo use sobre áreas de la piel sin sensibilidad o con mala circulación. El uso del calor por parte de niños o personas con discapacidades sin supervisión puede resultar peligroso. • **NO** use este masajeador cerca de prendas de vestir sueltas, alhajas o cabello largo. • **NUNCA** ponga en funcionamiento sobre una superficie blanda como una cama o sofá en donde las aberturas de aire puedan obstruirse. **Precaución: todo el servicio de este cojín para masaje debe ser realizado únicamente por personal de servicio de HoMedics® autorizado (Servicio no válido en México).**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

- Consulte con su médico antes de usar este producto si: - Usted está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación sobre su salud • **NO** se recomienda su uso por parte de diabéticos. • **NUNCA** deje el artefacto sin supervisión, especialmente si hay niños presentes. • **NO** use este producto durante más de 15 minutos por vez. • El uso prolongado puede causar un recalentamiento del producto y disminuir su vida útil. Si esto sucediera, interrumpa su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en funcionamiento. • **NUNCA** use este producto directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas. • **NO** use este producto como sustituto de la atención médica. • Este producto está equipado con un circuito de protección contra el sobrecalentamiento. Si se corta la corriente, espere hasta que el producto se enfríe. • **NUNCA** use este producto mientras está en la cama. • Este producto no debe ser usado **NUNCA** por personas que padezcan algún tipo de enfermedad física que limite la capacidad del usuario de manejar los controles o que tengan deficiencias sensoriales. • Este producto no está diseñado para ser usado en el automóvil. • Solo para uso doméstico. superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemadura seria. **NO** lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.

INSTRUCCIONES DE USO

Para reducir el riesgo de choque eléctrica, esta unidad está equipada con un enchufe polarizado (una varilla metálica es más ancha que la otra). Este enchufe encaja de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna forma. 1. Enchufe en un tomacorriente de 120 Volts c.a. 2. Coloque el cojín para masaje alrededor del cuello (Fig. 1) o en la zona de cuerpo que desea masajear. Las correas prácticas ayudan a colocarlo en posición y a controlar la intensidad fácilmente (Fig. 2). Vea la página 22 para obtener instrucciones sobre el uso del controlador.



Fig. 1



Fig. 2

MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Saque las manchas únicamente con una esponja suave, apenas humedecida. Nunca permita que la unidad entre en contacto con agua u otros líquidos. • NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla. • NO use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, o químicos agresivos, que puedan o no ser inflamables y/o causar daño al producto que desea limpiar. • NO intente reparar el masajeador. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita obtener servicio para la unidad, llame al número de teléfono de Relaciones con el consumidor que figura en la sección sobre la garantía (Servicio no válido en México).

PARA GUARDAR. Coloque el cojín para masaje en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes filosos u objetos punzantes que puedan cortar o perforar la superficie de tela. Para evitar roturas, no enrolle el cable alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad del cable.

COJÍN PARA MASAJE

Marca: HoMedics • Modelos: NMS-615HJ, NMS-615 y NMS-620H

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 20 W



Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas.

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026



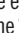
CONVENIENTE Y PORTÁTIL

Perfecto para el uso en el hogar o en la oficina.


NOTA: Los materiales y telas reales del producto pueden variar ligeramente de los que se muestran en la imagen.

NOTA: en esta unidad, hay una función de apagado automático que se activa, por su seguridad, al cabo de 15 minutos.


CALOR

Para obtener un calor relajante, cuando la función de masaje esté encendida, simplemente presione  el botón de calor y los nódulos masajeadores se iluminarán en el masajeador de cuello. Para anular la selección, vuelva a presionar el botón y los nódulos masajeadores correspondientes se apagaran.

PODER

Para encender las funciones de masaje, presione  el botón de encendido/apagado una vez. El masaje comenzará a alta velocidad. Presione el botón una segunda vez para obtener una velocidad media, una tercera vez para lograr una velocidad baja y una cuarta vez para apagar el masajeador.

SHIATSU INVERSA

El masajeador comenzará con un movimiento giratorio hacia adentro. Para cambiar la dirección de los nódulos masajeadores, simplemente presione el botón de reversa de shiatsu y los nódulos comenzarán a girar con un movimiento hacia afuera. Si presiona  el botón nuevamente, el masajeador volverá a tomar la dirección giratoria hacia adentro.