

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desee en el futuro.

Modelos: NMSQ-217H, NMSQ-217HJ y NMSQ-217H-CA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- NO intente agarrar un producto que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
- NO la utilice al bañarse o al ducharse.
- NO ponga ni guarde productos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo.
- NO lo ponga en el agua o en otros líquidos.
- NUNCA utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

- Un producto NUNCA debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas.
- NO debe ser utilizado por niños.
- Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este producto es usado por o cerca de personas inválidas o discapacitadas.
- Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®; en especial accesorios no provistos con la unidad.
- NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuélvalo al Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo opere en dónde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno.
- NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.
- NO traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado (off), y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.
- NO lo utilice en exteriores.
- NUNCA opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares.
- NUNCA opere el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sillón donde las aberturas de aire puedan bloquearse.
- Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.
- NO utilice este cojín para masaje muy cerca de ropa holgada, joyería o pelo largo.
- NO trate de reparar el aparato. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, póngase en contacto con el número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la Sección de Garantía.
- **PRECAUCIÓN: Todo el mantenimiento a este cojín para masaje de ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics® (Servicio no válido en México).**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

- Consulte a su médico antes de utilizar este producto si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud
- NO se recomienda para ser utilizado por diabéticos.
- NUNCA deje el aparato sin atención, especialmente si hay niños presentes.
- NO utilice este producto por más de 15 minutos por vez.
- El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla.
- NUNCA utilice este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas.
- NO use este producto como sustituto de la atención médica.
- El producto está equipado con un circuito de protección de sobrecalentamiento, si se corta la energía, por favor, espere hasta que el producto se enfríe.
- NUNCA use este producto mientras esté en la cama.
- Este producto nunca

debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de ninguna dolencia que limite la capacidad del usuario para operar los controles.

- NUNCA use este producto en automóviles.
- Este producto es únicamente para uso en el hogar.
- Este producto viene con una batería de litio recargable. El usuario no puede dar mantenimiento a esta batería. Por favor deséchela de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la clavija del adaptador dentro del enchufe por debajo de la correa del asa izquierda (Fig. 1). 2. Conéctela en un tomacorriente de 120 Volts c.a. 3. Esta unidad incorpora un marco de alambre que le permite ajustar el contorno de la unidad a su cuello. Ponga el cojín para masaje en el cuello y déle forma al marco de alambre hasta la posición deseada (Fig. 2). 4. Para activar la acción de masaje, presione el botón  en el tablero de control (Fig. 3). 5. Presione una vez para velocidad baja, una segunda vez para velocidad alta y presione nuevamente para apagar la unidad. 6. Para activar la función de calor, con el cojín para masaje funcionando, presione el botón  en el tablero de control (Fig. 3). 7. Para apagar la función de calor, simplemente presione nuevamente el botón 

NOTA: El calor es un calor suave y cómodo.

INSTRUCCIONES DE LAS BATERÍAS OPCIONALES

NOTA: Las baterías únicamente operarán la función de masaje. Debe utilizar el adaptador para activar la función de calor. 1. Ubique la cremallera en la parte posterior de la unidad. 2. Abra la cremallera para exponer el compartimiento de la batería y quite la tapa (Fig. 4). 3. Inserte 4 baterías AA (no incluidas). La orientación correcta de las baterías está marcada dentro de la carcasa del compartimiento de las baterías. 4. Vuelva a poner la tapa y cierre la cremallera de la parte posterior, asegurándose de que los extremos de la cremallera se toquen entre ellos para asegurar que la cremallera está bien cerrada. 5. Para activar el masaje, siga los pasos 4-5 de las instrucciones del adaptador.

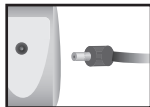


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

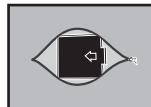


Fig. 4

PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS

- Utilice únicamente el tamaño y tipo de baterías especificado.
- Al instalar las baterías, observe que la polaridad +/- sea correcta. Una instalación incorrecta de las baterías puede causar daños a la unidad.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- No deseches las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Si no se va a utilizar la unidad por un periodo de tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños debidos a posibles fugas en las baterías.
- Limpie los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de instalarlas.
- Retire con prontitud las baterías agotadas.
- Elimine de forma apropiada de conformidad con todas las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.

NOTA: La unidad cuenta con una función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad. Esta no debe considerarse un sustituto para el apagado. Recuerde siempre apagar su unidad cuando no esté en uso.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA. Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie puntualmente sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad. • NO la sumerja en ningún líquido para limpiarla. • NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos o químicos fuertes que pudieren o no ser inflamables y/o dañar el producto para limpiarlo. • NO trate de reparar el aparato. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, llame al número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la Sección de Garantía (Servicio no válido en México).

ALMACENAMIENTO. Coloque el cojín para masaje en su caja, o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes agudos u objetos puntiagudos, que pudieren cortar o perforar la superficie de la tela. Para evitar que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad por el cable de corriente.

COJÍN PARA MASAJE

Marca: HoMedics • Modelos: NMSQ-217H, NMSQ-217HJ y NMSQ-217H-CA

Especificaciones eléctricas:

5.9 V--- 0.8 A 4.7 W / 4 Baterías tipo "AA" de 1.5 V--- c/u (No incluidas)

Adaptador. Marca: HoMedics • Modelo: SW-3525

Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.2 A

Salida: 5.9 V--- 0.8 A

Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarras o flamas. No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes. Use solo con el adaptador proporcionado.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026

NOM

ENCENDIDO

Presione una vez para velocidad baja, una segunda vez para velocidad alta y presione nuevamente para apagar la unidad.

CALOR

Calor relajante para un masaje más relajante El calor no funcionará a menos que la función de masaje esté encendida y la unidad esté conectada. El calor relajante no funcionará cuando la unidad está funcionando con baterías AA.

CONVENIENTE Y PORTÁTIL

Perfecto para uso en casa o en la oficina.

MASAJE DE VIBRACIÓN

ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN

El cojín para masaje de cuello está alimentado por un cable de corriente de 120 Volts c.a.

ASAS FLEXIBLES

Personalice la intensidad de su masaje jalando de las asas para obtener un masaje más intenso y liberando la presión para recibir un masaje más suave.

NOTA: No intente reparar el cojín para masaje de cuello. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, llame al número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la Sección de Garantía (Servicio no válido en México).

