

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desee en el futuro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

• Siempre desenchufe el dispositivo de la corriente eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. • NO intente tomar un dispositivo que haya caído en el agua. Desconéctelo inmediatamente. • NO lo utilice en la bañera ni en la regadera. • NO lo coloque ni lo guarde donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. • NO lo sumerja ni lo deje caer en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

• Este dispositivo tiene accesorios para temperaturas caliente y fría. Las personas con poca sensibilidad al calor o al frío deben tener cuidado al utilizarlo. • Nunca deje desatendido un dispositivo enchufado. Desenchúfelo de la corriente eléctrica cuando no lo utilice y antes de cambiar o extraer algún accesorio o pieza del mismo. • No es apto para ser utilizado por niños. • Es necesario supervisar el uso de este dispositivo cuando lo utilicen niños o personas discapacitadas. • Utilice este dispositivo solo para su uso previsto, tal y como se describe en estas instrucciones. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®, en particular, cualquiera que no esté incluido en el empaque. • **NUNCA** utilice este dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está roto o si se ha caído al agua o al piso. Devuélvalo al centro de servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • **NUNCA** inserte ni permita que entren objetos en las ranuras. • Nunca utilice alfileres u otros sujetadores metálicos con este dispositivo. • NO lo utilice en lugares donde se esté utilizando productos en aerosol (spray) o se maneje oxígeno. • NO lo utilice debajo de alguna manta o almohada. Podría producirse un sobrecalentamiento y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones físicas. • NO sujete este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa. • Para desconectar, coloque todos los botones en la posición "apagado" (off) y desenchufe el dispositivo de la toma de corriente. • NO lo utilice en exteriores. • **NUNCA** lo utilice si las ranuras de ventilación están obstruidas. Mantenga las ranuras libres de pelusa, cabello, etcétera. • **NUNCA** lo utilice sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las ranuras de ventilación pudieran obstruirse. • Maneje las superficies calientes con cuidado. Podrían causar quemaduras graves. NO utilice sobre zonas de piel poco sensibles o con mala circulación. El uso del calor por parte de niños y personas discapacitadas puede ser peligroso. • Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras lo esté utilizando. • NO lo utilice esté cerca de personas que vistan ropa holgada o joyería.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

• Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • No se recomienda para ser utilizado por diabéticos. • Nunca deje el producto sin atención, especialmente si hay niños presentes. • Nunca cubra el dispositivo cuando esté en funcionamiento. • No lo utilice durante más de 15 minutos seguidos. • Un uso prolongado podría provocar el sobrecalentamiento del producto y acortar su vida útil. Si esto ocurriera, interrumpa el uso y deje que el dispositivo se enfríe antes de utilizarlo. • Nunca utilice este producto directamente en partes del cuerpo que estén hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas. • NO utilice este producto como sustituto de la atención médica. • NO utilice este producto antes de acostarse. El masaje tiene un efecto estimulante y podría retrasar el sueño. • **NUNCA** use este producto estando en la cama. • Este producto **NUNCA** debe utilizarse por personas con alguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para manejar los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad inferior del cuerpo. • Este dispositivo no es apto para niños o personas discapacitadas, sin supervisión de un adulto. • **NUNCA** utilice este producto en automóviles. • Este aparato está destinado para uso doméstico solamente **ATENCIÓN: LA OPCIÓN DE CALOR RELAJANTE FUNCIONARÁ ÚNICAMENTE CUANDO LA FUNCIÓN DE MASAJE ESTÉ SELECCIONADA.**

INSTRUCCIONES DE USO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este dispositivo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Dicho enchufe entrará de una sola forma en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, voltéelo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista para realizar la instalación de una toma de corriente adecuada. **NO** modifique el enchufe o las clavijas de ninguna forma. 1. Esta unidad se alimenta por medio

del cable aprobado por UL incluido. Asegúrese SIEMPRE de que la unidad esté en la posición APAGADO/OFF antes de insertar el enchufe en una toma de corriente de 120 Volts c.a. 2. Masaje: Para activar la función de masaje, deslice el interruptor inferior a ENCENDIDO/ON. Deslice el interruptor hacia delante (A) para aumentar la intensidad. **MASAJE + CALOR:** Una vez activada la función de masaje, pulse el botón CALOR/HEAT (B) para activar el calor. **NOTA:** La función Calor (Heat) puede activarse únicamente cuando la función Masaje está seleccionada. **NOTA:** La función Calor se activará solamente cuando se utilice el accesorio de Calor Térmico. Nunca utilice el accesorio de calor si la carcasa está agrietada o rota, o si la placa metálica está suelta, doblada o separada de la base. **NOTA:** Para eliminar el riesgo de quemaduras, no utilice el calor de forma continua durante más de 15 minutos. No utilice los masajes con calor o frío si tiene la piel sensible, mala circulación, zonas descoloridas, hinchadas, quemadas, inflamadas o con erupciones o llagas en la piel. Los masajes con calor o frío deben ser cómodos y agradables. Si se produce dolor o malestar, interrumpa su uso y consulte a su médico.

3. Coloque el accesorio del masajeador ejerciendo una ligera presión sobre la zona que desea masajear. 4. Desplace el dispositivo lentamente, manteniéndolo en la zona muscular o el área deseada. Masajee la zona durante un breve periodo de tiempo y después cambie de zona. **NUNCA** masajee la misma zona durante más de 3 minutos. **PRECAUCIÓN:** Como se indica en la sección INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD de este manual, **NUNCA** utilice este dispositivo sobre o cerca de los ojos u otras zonas altamente sensibles. 5. No se recomienda utilizar por más de 15 minutos, ya que puede provocar el sobrecalentamiento del producto. 6. Una vez terminado el masaje, apague el dispositivo, deje que se enfríe, desenchúfelo y guárdelo adecuadamente en un lugar seco.

OBSERVACION SOBRE EL ACCESORIO DE MASAJE EN FRÍO:


El accesorio de masaje en frío debe guardarse en el congelador durante un mínimo de 2 horas antes de utilizarlo para que tenga un rendimiento óptimo. A temperatura ambiente, el accesorio para masaje en frío se mantendrá frío hasta 15 minutos en un uso continuo. A medida que el accesorio pierde gradualmente su estado de congelación durante 15 minutos, presione suavemente los bordes de la superficie del gel frío para hacer circular las perlas más frías en la piel.

CAMBIO DE ACCESORIOS

Su masajeador viene equipado con 9 cabezales para un masaje personalizado.



- A. Presión distribuida
- B. Concentrado
- C. Rotatorio
- D. Texturizado
- E. Espiral
- F. Calor térmico
- G. Gel frío
- H. Esferas
- I. Presión suave

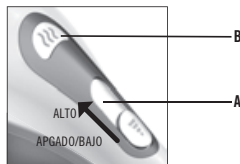

Para cambiar de accesorio, simplemente tire hacia abajo del mismo para extraerlo (Fig. 1) del eje del masajeador. Para colocar el nuevo cabezal de masaje, alinee la ranura del accesorio con la ranura del eje (solo F, G y H) y presione. Utilice únicamente los accesorios proporcionados por Homeedics®.

NOTA: Para la función de calor, únicamente podrá utilizarse el cabezal para masaje con calor térmico (F).

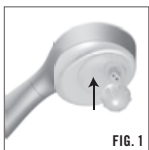


FIG. 1

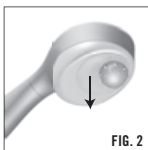


FIG. 2

MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO.

Asegúrese de desconectar el dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y ligeramente húmedo.

ALMACENA.

Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de guardarlo en su caja o en un lugar limpio y seco. NO cuelgue el dispositivo por el cable de alimentación.

Atención: La opción de calor solo funcionará cuando la función del masaje esté seleccionada.

Precaución: El mantenimiento de este dispositivo debe ser realizado exclusivamente por personal de servicio autorizado de HoMedics® (Servicio no válido en México).

MASAJEADOR MANUAL

Marca: HoMedics • Modelos: HHP-225H, HHP-225H-THP, HHP-255HJ-THP y HHP-255H-CA

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 16 W



Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas.

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026