

Tómese un momento ahora. Registre su producto en [www.homedics.com/register](http://www.homedics.com/register) Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**PRECAUCIONES IMPORTANTES.** AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

**PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**

• Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo, y antes de limpiarlo. • NO intente agarrar un producto que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente. • NO lo utilice al bañarse o al ducharse. • NO ponga ni guarde productos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo. • NO lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.

**ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:**

• Un producto NUNCA debe dejarse sin atención cuando está conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas o aditamentos. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este electrodoméstico es usado por, en o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios no provistos con la unidad. • NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo opere en donde se estén utilizando productos en aerosol, o en donde se esté administrando oxígeno. • NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • NO traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa. • Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • NO la utilice en exteriores. • NUNCA opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • NUNCA lo utilice sobre una superficie suave, como una cama o un sillón, donde las aberturas podrían bloquearse. • Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso. • NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería. • Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. • Recargue únicamente con el adaptador provisto con la unidad. Un adaptador que es adecuado para un tipo de paquete de batería puede causar un riesgo de incendio al usarlo con otro paquete de batería. Solo se deben usar adaptadores diseñados para la parte número: PP-HHP715ADP. • No exponga el paquete de batería o el dispositivo al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión. • Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería o el dispositivo fuera del rango de temperaturas especificadas en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Rango de operación y carga del producto: 0 °C – 40 °C


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.**

• Este producto no está diseñado para uso médico. • Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • NO se recomienda para ser utilizado por diabéticos. • NUNCA deje el aparato sin atención, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA cubra el aparato mientras se encuentre en funcionamiento. • NO utilice este producto por más de 15 minutos por vez. • El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla. • NUNCA utilice este producto directamente sobre áreas

hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas. • NO utilice este producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a la cama. El masaje tiene un efecto estimulante y puede demorar el sueño. • NUNCA use este producto mientras esté en la cama. • Este producto NUNCA debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo. • Esta unidad no debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto. • NUNCA use este producto en automóviles. • Este producto es únicamente para uso en el hogar. Este producto tiene una batería interna de ion de litio no reemplazable. La batería no puede ser reparada por el usuario. Por favor deséchela de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales. ser utilizado por ningún individuo que sufra de ninguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para operar los controles o que presente deficiencias sensoriales. • Este producto no debe ser utilizado en automóviles. • Este producto es únicamente para uso en el hogar.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Su masajeador, cuando se abre, puede requerir carga. Para cargar su masajeador, conecte el cable adaptador en el puerto de la parte baja de la asa del masajeador y conecte el otro extremo a un tomacorriente de 120 V c.c. Su masajeador estará cargado totalmente después de un tiempo de carga mínimo de 4.5 horas y la carga durará hasta 2.5 horas - **NOTA:** El masajeador no se encenderá mientras esté cargando. Las 4 luces LED se iluminarán cuando la carga esté completa. 2. Para encender el masajeador, presione y sostenga el botón de encendido  durante 3 segundos. Los indicadores LED de nivel de batería se iluminarán para confirmar que la unidad está encendida.


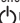
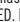
3. Una vez encendida la unidad, presione el botón  de encendido una vez para comenzar el masaje en intensidad baja (Fig. 1). Presione el botón  una vez para aumentar la intensidad a media y una tercera para aumentarla a alta. Presionar el botón una cuarta vez detendrá el movimiento de percusión pero la unidad continuará encendida. Presionar el botón nuevamente retomará la acción de percusión en intensidad baja. 4. Aplique el cabezal de masaje al músculo que desea dar masaje. Consulte la tabla correspondiente en la página 21 para ayudar a guiarle para saber qué aditamento usar. 5. Cuando termine el masaje, apague la unidad oprimiendo y sosteniendo el botón de encendido  durante 3 segundos. La unidad estará apagada cuando se apaguen todas las luces LED. **PRECAUCIÓN: NUNCA utilice este aparato en o cerca de los ojos u otras áreas altamente sensibles.** **NOTA:** Esta unidad está equipada con una función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad.



Fig. 1



**1. ACCESORIO DE PUNTOS DESENCADENANTES.** Concentra el masaje en las zonas problemáticas y relaja los puntos desencadenantes de tensión muscular. También es ideal para aplicar puntos de presión pequeños, por ejemplo en manos y pies. **2. ACCESORIO DE BOLA.** Aditamento perfecto para uso general. Este aditamento se puede usar en grupos musculares grandes y pequeños. **3. ACCESORIO EN FORMA DE U.** Este accesorio es excelente para concentrar el masaje en los músculos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y alrededor de las articulaciones. **4. ACCESORIO PLANO.** Su superficie reducida permite aplicar el masaje en puntos específicos. Se aprovecha mejor si se usa para concentrar el masaje en zonas tales como la cintilla iliotalibial y los músculos isquiotibiales y pectorales.

## MANTENIMIENTO

**PARA LIMPIAR:** • Asegúrese de desconectar la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Use un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar. • NUNCA permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la asa. • Este producto tiene una batería interna de litio no reemplazable. El usuario no puede dar mantenimiento a esta batería. Por favor deséchela de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.

**PARA GUARDARLA:** • Almacene esta unidad en su caja o en un lugar limpio y seco. • NO cuegue la unidad por el cable de corriente. • El producto se debe almacenar a 25 °C -

**PRECAUCIÓN:** Todo el mantenimiento a esta unidad debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics® (Servicio no válido en México).

**EL MOTOR DE ALTO PAR PROPORCIONA  
UN MASAJE DIRIGIDO**

**CONTROLES LED FÁCILES DE USAR  
CON UN SOLO BOTÓN:  
3 INTENSIDADES**

**NIVELES LED DE ENERGÍA:  
LA UNIDAD NECESITA  
RECARGARSE CUANDO LOS  
LED SOLO TENGAN UNA LUZ  
ENCENDIDA**

**PUERTO DE CARGA**



#### **MASAJEADOR MANUAL**

Marca: HoMedics • Modelo: HHP-715

Especificaciones eléctricas: 12 V $\equiv$  1 A (1 Batería interna de litio tipo "18650" de 1.2 V $\equiv$  2 000 mAh) (Integrada)

Adaptador. Marca: Innov • Modelo: IVP1260-100w

Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.5 A

Salida: 12.6 V $\equiv$  1 A

Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas.

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras.

El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

**Advertencia:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Use solo con el adaptador proporcionado. El producto sólo debe alimentarse a tensión extrabajada de seguridad y a la tensión marcada en el aparato.

**Importado por:** COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026

**NOM**