

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

MASAJEADOR DE PERCUSIÓN DUAL CON NÓDULOS Y CALOR

Modelos: HHP-351H y HHP-351H-JCP

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

• Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo. • NO intente agarrar un producto que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente. • NO lo utilice al bañarse o al ducharse. • NO ponga ni guarde electrodomésticos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo. • NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

• Un producto NUNCA debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este electrodoméstico es usado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®; en especial accesorios no provistos con la unidad. • NUNCA opere el aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo opere en donde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno. • NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • NO traslade este producto jalándolo del cable de alimentación, ni utilice el cable de alimentación como asa. • Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado (off), y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • NO la utilice en exteriores. • NUNCA opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • NUNCA lo utilice sobre una superficie suave, como una cama o un sillón, donde las aberturas podrían bloquearse. • Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapaces puede ser peligroso. • Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso. • NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

• Este producto no está diseñado para uso médico. Se diseñó únicamente para proporcionar un masaje de lujo. • Consulte a su médico antes de utilizar este producto. si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • NO se recomienda su uso en diabéticos. • Nunca deje el producto sin atención, especialmente si hay niños presentes. • Nunca cubra el aparato mientras se encuentre en funcionamiento. • NO utilice este producto por más de 15 minutos por vez. • El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla. • Nunca utilice este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas. • NO use este producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a la cama. El masaje tiene un efecto estimulante y puede demorar el sueño. • NUNCA use este producto mientras esté en la cama. • Este producto NUNCA debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo. • Esta unidad no debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto. • NUNCA use este producto en automóviles. • Este producto es únicamente para uso en el hogar.

INSTRUCCIONES DE USO




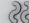


Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe cabe en una toma de corriente polarizada sólo de una manera. Si el enchufe no cabe en la toma de corriente, invierta su posición. Si aún no cabe, hable con un electricista calificado para que instale una toma de corriente apropiada. No cambie el enchufe en forma alguna. 1. Siempre cerciéndose de que la unidad esté en la posición de apagado ("off") antes de insertar el enchufe en la toma de corriente eléctrica de 120 Volts c.a. 2. Para encender la unidad, basta con pulsar el botón de encendido  situado en la parte superior del mango. Esto iniciará la unidad en la posición más baja. Para aumentar la intensidad del masaje, continúe presionando el botón de encendido  hasta que la intensidad deseada. Para apagar la unidad, continúe presionando el botón de encendido  más allá de la configuración de mayor intensidad, que se reiniciará el ciclo de intensidad y apagar la unidad (Fig. 1). 3. Para encender la función de calor relajante  el masajeador debe estar encendido. Para activar la función de calor relajante, oprima el botón de calor  ubicado sobre las barras de intensidad en la parte superior del asa (figura 1). Para cancelar la función de calor relajante, oprima el botón de calor  por segunda vez. **NOTA:** La función de calor funciona mejor cuando se exponen los aditamentos rojos de nodo de calor. **NOTA:** No use el calor por más de 15 minutos seguidos. No use el calor si tiene una piel sensible, mala circulación, áreas descoloridas, hinchazones, quemaduras, inflamaciones o si hay erupciones o lagas de la piel. El calor relajante debe ser agradable y cómodo. Si tiene dolor o incomodidad, deje de utilizarlo y consulte a su médico. 4. Aplique suavemente la cabeza masajeadora al área que usted deseemasajear. 5. Mueva la unidad lentamente, manteniéndola sobre el área deseada. Masajea el área por un breve periodo de tiempo y luego cambie a otra área. Nunca masajee el mismo lugar por más de 3 minutos. **PRECAUCIÓN – Como se indicó en las "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" de este manual, nunca use este aparato en o cerca de los ojos u otras áreas de alta sensibilidad.** 6. Mueva el aparato lentamente, manteniéndolo en el área deseada. Masajea el área por un breve periodo de tiempo y luego cambie a otra área. Nunca masajee el mismo lugar por más de 3 minutos. 7. Al terminar con los masajes, apague la unidad, desenchufe el cordón eléctrico, déjela enfriar y guárdela apropiadamente en un lugar seco. **NOTA:** La unidad cuenta con una función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad.

Fig. 1



PARA CAMBIAR LOS NÓDULOS ADJUNTOS

Su masajeador viene con 2 conjuntos de nódulos personalizados.



Blanco - masaje firme



Gris - masaje suave

Para cambiar a un conjunto diferente, simplemente gire el conjunto que se encuentra sobre la unidad en la dirección contraria a las manecillas del reloj, presione y gire el conjunto deseado en la dirección de las manecillas del reloj.

MANTENIMIENTO

PARA GUARDAR.

Desconecte el aparato del tomacorriente y permita que se enfríe antes de guardarlo en su caja o en un lugar seco y limpio. Enrolle el cable y asegúrelo con el sujetador incluido. No cuelgue la unidad por el cable de corriente.

PARA LIMPIAR

Limpie únicamente con un trapo suave y húmedo y con un agente limpiador suave. Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.

• No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo. • Nunca utilice abrasivos fuertes, detergentes o agentes limpiadores. • Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, vidrio, brillo para muebles o disolvente de pintura para limpiarlo. • NO intente reparar el Masajeador con Acción de Percusión. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, llame al número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la sección de garantía. (Servicio no válido en México).

Nota: La unidad tiene una función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad.



MASAJEADOR MANUAL

Marca: HoMedics • Modelos: HHP-351H y HHP-351H-JCP

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 20 W

Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarras o flamas.

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras.

El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026

NOM